
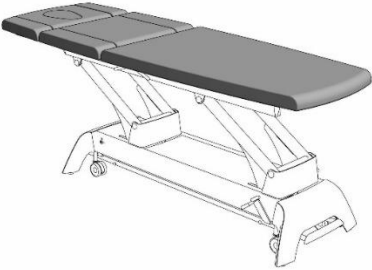
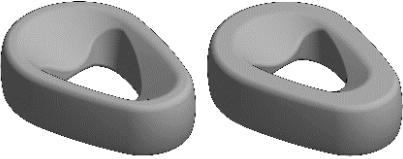


	Algemeen	Reinigen	Desinfecteren
Constructie 	Materialen: <ul style="list-style-type: none"> • Staal of aluminium met poederlak • Staal verzinkt of verchroomd • Harde en zachte kunststoffen • Samengeperst en gelijmd beukenfineer (gymna.ONE) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de constructie regelmatig met een schone zachte en droge microvezeldoek. • Bij hardnekkig vuil de doek licht bevochtigen. • Gebruik schoon water of een glasreiniger. • Gemorste vloeistoffen direct verwijderen. 	Indien gewenst kan gedesinfecteerd worden zoals voor de kussens en Ergomax.
Kussens 	Materialen: <ul style="list-style-type: none"> • Vinyl kunstleer 'Classique' • Polyurethaan kunstleer 'Premium' Bijzonderheden: <ul style="list-style-type: none"> • Ftalaatvrij • Biocompatibel • Premium optioneel voor gymna.PRO 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik lauwwarm water en een microvezeldoek. • Bij hardnekkig vuil ook een PH-neutrale zeepoplossing gebruiken. • Verwijder de zeepresten met een vochtige doek. 	Opgelet: Eerst reinigen vóór desinfecteren. De kussens en Ergomax kunnen gedesinfecteerd worden met een groot aantal desinfecteringsmiddelen. Deze staan genoteerd in de tabel op pagina 2 .
Ergomax 	Materialen: <ul style="list-style-type: none"> • Polyurethaan volschuim Bijzonderheden: <ul style="list-style-type: none"> • Waterdicht, kan eenvoudig onder de kraan gereinigd worden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bloedvlekken moeten onmiddellijk verwijderd worden met koud water. • Massageolie onmiddellijk verwijderen met een PH-neutrale zeepoplossing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de voorschriften op de verpakking m.b.t. concentraties en gebruik. • Gebruik slechts één desinfecteringsmiddel en spoel na met schoon water.
Extra aanwijzingen	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik IN GEEN GEVAL detergenten, oplosmiddelen (alcohol), agressieve zepen en bleek- of schuurmiddelen. • Gebruik geen onderhoudsmiddelen voor leder waarin olie of vet is verwerkt. • Gebruik nooit een menging van verschillende desinfecteringsmiddelen. • De kussens en Ergomax zijn niet geschikt voor desinfecteren of sterilisatie door middel van warmte. 		

Desinfecteringsmiddel	Classique	Premium
Acryl-des	●	
Actichlor Plus		● 5000 ppm
Actrill Cold Sterilant		● 100%
Aldasan 2000	●	
Alpet D2	●	
Antifect FD 10	●	
Antigone wipes	●	
Antiseptica Kombi Flächen	●	
B10	●	
Bacillol 30 foam	●	● 100%
Bacillol 30 tissues		●
Bacillol AF	●	
Bacillol AF-tissues	●	
Biguacid Plus	●	
Biguacid-S	●	
Biguanid Fläche N	●	● 4%
Chlor-Clean tablets		● 5000 ppm
Cleanisept	●	
Clinell Alcohol wipes	●	
Clinell Sporicidal wipes		●
Clinell Universal wipes	●	
Clorina	●	
CosiMed	●	
Descocid-N	●	
Descogen Liquid	●	
Descosept AF	●	
Desomed Rapid Universal	●	
Dettol		● 5%
Dismozon pur		● 4%
Esemfix	●	
Ethanol		● 75%
Formaldehyde		● 30%
Fugaten	●	
Germatol		● 100%
Gevisol	●	
Haz-Tabs		● 5000 ppm
Hexaquart plus	●	
Hexaquart SF	●	
Hospisept - wipes	●	
Hydrogenperoxide		● 30%

Desinfecteringsmiddel	Classique	Premium
Immix Clean	●	
Incidin Extra N		● 5%
Incidin foam		● 100%
Incidin OxyFoam		● 100%
Incidin OxyFoam S		● 100%
Incidin OxyWipe S		●
Incidin Plus		● 4%
Incidur Active	●	
Incidur Extra	●	
Incidur Extra N	●	
Incidur Foam	●	
Incidur Liquid Spray	●	
Incidur Perfekt	●	
Incidur Plus	●	
Incidur rapid	●	
Incidur Spray	●	
Isopropanol		● 45%
Joya	●	
Kohrsolin extra tissues	●	
Lysoformin	●	
Lysoformin 2000	●	
Lysoformin spezial	●	
Maxitücher Alkoholfrei		●
Maxitücher Gebrauchsfertig Ruck		●
Meliseptol	●	● 100%
Meliseptol foam pure + fresh	●	
Meliseptol rapid	●	
Melsept SF	●	
Melsitt	●	
Micro Clean	●	
Micro Clean Foam	●	
Mikrobac forte	●	
Mikrobac tissues	●	
Mikrozid AF liquid	●	
Mikrozid AF wipes	●	●
Mikrozid sensitive liquid	●	
Mikrozid sensitive wipes	●	
Mikrozid universal wipes premium		●

Desinfecteringsmiddel	Classique	Premium
Neoform M rapid	●	
Optisal N	●	
Optisept	●	
P3-topax 66		● 5%
Perform	●	
Pursept-A Xpress	●	
Pursept-FD	●	
Sagrotan Hygiene-spray	●	● 100%
Sani-Cloth Active - wipes	●	
Sanit P20		● 100%
Septapin Aquaquick	●	
Septapin wipes	●	
Sodium hypochlorite		● 5000 ppm
Sprint 200		● 2%
Suma bac D10		● 1%
Suma Tab D4	●	
Surfa Safe	●	
Surfa Safe Premium		● 100%
Surfanios Premium		● 3%
Terralin liquid	●	
Terralin protect	●	● 4%
Topmax 421		● 5%
TPH protect	●	
Trichlorol	●	
Ultrasol active		● 5%
Umonium medical spray		● 100%
Virkon		● 1%
Volvone		● 40%

Disclaimer

GymnaUniphy NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de desinfecterende werking van de hierboven beschreven middelen.

© 2020 GymnaUniphy NV

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GymnaUniphy NV.