

Gymna.ONE est conçu pour vous offrir les meilleures conditions possible dans la réalisation de vos traitements et touche au cœur de votre pratique. Combiné à la fiabilité éprouvée de la technologie Gymna, le design pur et moderne de cette table de massage offre une véritable atmosphère harmonieuse à votre pratique.

Gymna.ONE - T7 est une table de massage réglable en hauteur avec sept coussins pour soutenir la tête du patient, ses bras, le haut et le bas de son corps. Les deux supports latéraux permettent de maintenir le thérapeute en position de travail ergonomique. ■

CARACTÉRISTIQUES

I-CONTROL

Un système à pédale intelligent de réglage en hauteur, qui peut être atteint de n'importe où autour de la table, de manière sûre et aisée. i-Control facilite un réglage en hauteur facile et précis de deux façons : un mode continu pour de rapides mouvements de haut en bas, et un mode marche-arrêt pour de petits ajustements pulsés.

COUSSINS THERMO

Gymna.ONE dispose de coussins Thermo, un système de chauffage unique. Trois niveaux de température peuvent être choisis facilement en utilisant la pratique télécommande sans fil.

ERGOMAX

Support de tête lisse, amovible, lavable, waterproof et ergonomique, pour une position couchée confortable et hygiénique.

EASYMOVE

Presser le système de commande à pédale Easymove fait monter la table de massage sur ses roues. L'amortisseur hydraulique du système ramène doucement gymna.ONE sur le sol. Le système peut être atteint depuis les deux côtés de la table.

SUPPORTS LATÉRAUX

Ces supports permettent de maintenir une position de travail ergonomique. Vous pouvez travailler à proximité de votre patient sans stress sur les épaules et le dos.

SECTION CENTRALE MOTORISÉE (EN OPTION)

Le réglage de la section centrale pour une flexion lombaire est aisé, grâce au moteur puissant mais silencieux. Les patients peuvent rester totalement détendus tout en étant placés en position correcte. Son utilisation est facile grâce aux formes ergonomiques et aux commutateurs positionnés sous le coussin.

SUPPORTS DE BRAS

Les longs supports de bras fournissent assez d'espace pour laisser complètement reposer les bras et engendrent une relaxation totale des régions du cou et de l'épaule, en position couchée.

PROFIL DE STABILITÉ GYMNA

La technologie unique de GSP vous assure de la meilleure stabilité dynamique. La construction solide et stable garantit que vos forces de manipulation soient correctement transférées au patient avec une utilisation optimale de l'énergie.

PROPRIÉTÉS DES COUSSINS

Les coussins gymna.ONE sont doublement rembourrés, avec une couche inférieure de haute densité et un haut plus moelleux, pour un compromis durable et confortable, idéal pour une thérapie manuelle sans perturbation pour le patient. Les bords des coussins sont également rembourrés pour le confort du thérapeute et du patient.

RECOUVREMENT

Les coussins sont recouverts d'un vinyle de haute qualité, sans phtalate, ignifugé, facile à nettoyer et désinfecter. La finition des bords, finement détaillée et réalisée au petit point sellier, donne une jolie touche finale aux coussins. Choisissez l'une des cinq couleurs qui reflètent votre professionnalisme et créez la bonne atmosphère pour votre pratique.

SUPPORTS DE TRACTION

Ces accessoires optionnels aident à maintenir le patient fermement en position pendant une traction ou mobilisation manuelle, cervicale ou de la hanche. Deux supports peuvent être placés dans l'intervalle entre la tête et la section médiane, un autre entre les parties supérieure et inférieure du corps.

PIEDS ANTIDÉRAPANTS

Grâce aux pieds spéciaux Elastolan placés sous la base, gymna.ONE reste fermement en place, même lors d'une forte traction ou manipulation.

INTERRUPTEUR À CLÉ POUR MODE VEILLE

Gymna.ONE a un interrupteur à clé intégré qui permet à l'opérateur de désactiver la table lorsqu'elle n'est pas utilisée et de prévenir une utilisation non autorisée en retirant la clé.



I-CONTROL



COUSSINS THERMO



SUPPORTS DE BRAS




ERGOMAX

SPÉCIFICATIONS

Longueur x largeur :	± 205 x 67 cm	Température maximale :	En activité 10° - 35°C Transport/stockage -20° - 60°C
Réglage de la hauteur :	± 50 - 100 cm	Humidité maximale :	En activité 30 - 75 %rH Transport/stockage 15 - 85 %rH
Poids :	± 122 kg	Pression atmosphérique :	En activité 700 - 1060 hPa Transport/stockage 500 - 1060 hPa
Capacité de levage max.:	200 kg	Conformité :	Les tables de massage gymna.ONE sont en conformité avec les directives suivantes : Dispositifs médicaux 93/42/ EEC (MDD) (ce qui implique le respect des exigences essentielles et de la conformité aux normes harmonisées applicables). Déchets d'équipements électriques et électroniques 2002/96/EC (WEEE). Réduction de certaines substances dangereuses 2011/65/EU (RoHS).
Moteur électrique :	8.000 et 6.000 N		
Température des coussins :	34 - 36 - 38°C		
Alimentation :	100 - 240 VAC, 50-60 Hz		
Consommation courante :	2,3 A		
Usage:	ON 2 minutes, OFF 18 minutes		
Classe d'isolation :	II		
Résistance à l'humidité :	IP 21		
Classification:	I		
Garantie :	3 ans (recouvrement 1 an)	CE	

FONCTIONALITÉS/DIMENSIONS

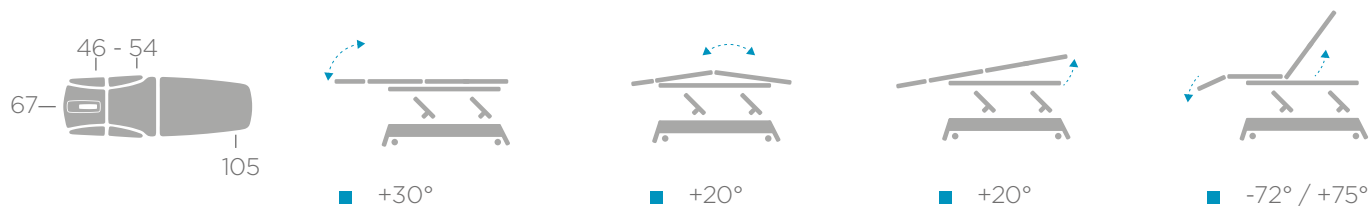

COULEURS

Base :	Coussins :
Blanc	Carbon
Darkwood	Patina
Ivory	Taupe

RÉFÉRENCE
DE LA COMMANDE

160 374 gymna.ONE - T7

150 304 option motorized mid section