

Gymna.ONE staat in het middelpunt van uw praktijk en is ontworpen om u de best mogelijke condities voor uw behandelingen te bieden. De bewezen betrouwbaarheid van de Gymna technologie gecombineerd met het pure en moderne design van deze behandelbank creëren een harmonieuze sfeer in uw praktijk.

Gymna.ONE – T7 is in een hoogte verstelbare bank met zeven kussens die het hoofd, de armen het boven- en onderlichaam van de patiënt ondersteunen. De twee extra lateraal steunen maken het mogelijk dat de therapeut zijn ergonomische werkhouding behoudt. ■

FEATURES

I-CONTROL

Intelligent voet bedieningssysteem om de hoogte in te stellen dat overal rond de tafel op een gemakkelijke en veilige manier bereikt kan worden. I-Control faciliteert gemakkelijke en nauwkeurige hoogteverstelling op twee manieren: continue modus voor op en neer bewegingen en een start stop modus voor kleine pulserende aanpassingen.

THERMO KUSSENS

Gymna.ONE heeft Thermo kussens met een uniek verwarmingssysteem. Er kunnen op een eenvoudige manier drie temperatuurniveaus gekozen worden met de handzame draadloze afstandsbediening.

ERGOMAX

Naadloos, te verwijderen, wasbaar, waterproof en ergonomisch gevormde gezichtssteun voor een comfortabele en hygiënische liggende positie.

EASYMOVE

Door op het voetpedaal van het Easy-move systeem te duwen, wordt de behandelbank op zijn wielen gezet. De hydraulische demper in het systeem, zet Gymna.ONE weer geleidelijk op de vloer. Het systeem kan aan beide kanten van de bank bereikt worden.

LATERAAL STEUNEN

Deze steunen maken het mogelijk een ergonomische positie te behouden. Het

is mogelijk dicht bij de patiënt te werken zonder spanning op de schouders en de rug.

GEMOTORISEERD MIDDENDEEL (OPTIONEEL)

Het instellen van het middelste gedeelte van de lumbale flexie gaat moeiteloos dankzij de krachtige maar stille motor. Patiënten kunnen totaal ontspannen blijven terwijl ze in de juiste positie geplaatst worden. De bediening is gemakkelijk met de ergonomisch gevormde schakelaars die zich onder het kussen bevinden.

ARMSTEUNEN

De lange armsteunen bieden voldoende ruimte om de armen volledig te laten rusten en brengen bij een buikligging totale ontspanning voor de nek- en schouderpartij.

GYMNA STABILITEITSPROFIEL

De unieke GSP technologie garandeert de best mogelijke dynamische stabiliteit. De solide en stabiele constructie zorgen ervoor dat de manipulatiekracht met een optimaal gebruik van energie wordt overgebracht naar de patiënt.

EIGENSCHAPPEN VAN DE KUSSENS

Gymna.ONE kussens zijn duo gewatteerd met een onderlaag die een hoge dichtheid heeft en daarboven op een zachtere top-laag. Het resultaat is een duurzaam maar comfortabel kussen, uitermate geschikt

voor manuele therapie zonder ongemakken voor de patiënt. De randen van de kussens zijn ook gewatteerd voor het comfort van zowel therapeut als patiënt.

STOFFERING

De kussens zijn bedekt met een hoog kwaliteitsvinyl dat ftalaat-vrij, brandvertragend, te desinfecteren en gemakkelijk schoon te maken is. De zorgvuldig, gedetailleerde met zadelsteek gemaakte contour, geeft de kussens een luxe afwerking. Er kan gekozen worden uit vijf kleuren die het voor elke professional mogelijk maakt de juiste sfeer in zijn praktijk te creëren.

TRACTIE STEUNEN

Deze optionele accessoires helpen de patiënt stevig in positie te houden tijdens cervicale tractie en mobilisatie. Ze kunnen in het scharnier tussen het hoofd- en het rug-deel geplaatst worden.

ANTISLIIPPOTEN

Dankzij de speciale Elastollan poten onder de basis blijft Gymna.ONE stevig op zijn plaats staan, zelfs als er sprake is van stevige tractie of manipulatie.

STAND-BY SLEUTELSCHAKELAAR

Gymna.ONE heeft een geïntegreerde sleutelschakelaar die het de bediener mogelijk maakt de bank te deactiveren wanneer hij niet in gebruik is. Door de sleutel te verwijderen wordt niet-geautoriseerd gebruik voorkomen.



I-CONTROL



THERMO KUSSENS



ARMSTEUNEN



ERGOMAX

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte x breedte:	± 205 x 67 cm
Hoogte instelling:	± 50 - 100 cm
Gewicht:	± 122 kg
Max. hefvermogen:	200 kg
Elektrische motor:	8,000 en 6,000 N
Kussen temperatuur:	34 - 36 - 38°C
Stroomvoorziening:	100 - 240 VAC, 50-60 Hz
Stroomverbruik:	2.3 A
Gebruik:	AAN 2 minuten, UIT 18 minuten
Isolatieklasse:	II
Vochtbestendigheid:	IP 21
Classificatie:	I
Garantie:	3 jaar (stoffering 1 jaar)

Maximum temperatuur: **In werking 10° - 35°C**
Transport/opslag -20° - 60°C



Maximale vochtigheid: **In werking: 30 - 75 %rH**
Transport/opslag 15 - 85 %rH

Atmosferische druk: **In werking**
700 - 1060 hPa
Transport/opslag
500 - 1060 hPa

Overeenstemming: **De gymna.ONE behandelbanken zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen: Medische hulpmiddelen 93/42/EEC (MDD) (dit impliceert voldoen aan essentiële eisen en in overeenstemming met gestandaardiseerde normen.) Afgedankte elektrische apparaten en elektronenmicroscopie : ic-apparatuur 2002/96/EC (WEEE). Beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen: 2011/65/EU (RoHS).**



FUNCTIONALITEIT / AFMETINGEN

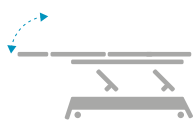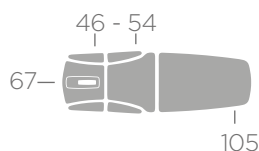


■ +30°



■ +20°



■ +20°

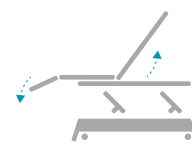

■ -72° / +75°

KLEUREN

Basis:



Wit

Kussens:



Carbon



Patina



Ivory



Darkwood



Taupe

BESTELGEGEVENS

160 374 gymna.ONE - T7

150 304 option motorized mid section