

Gymna Stools

Take your seat



gymna[®]

gymna.com



Gymna Saddle Stool und Gymna Stool

*Verbessern Sie das professionelle
Erscheinungsbild Ihrer Praxis*

Gymna Stools und Saddle Stools sind die perfekte Ergänzung zu den Gymna-Behandlungsliegen. Gemeinsam verbessern sie das professionelle Erscheinungsbild Ihrer Praxis.

Saddle Stool:	Breite 42 cm, mit einstellbarer Beckenneigung
Stool:	Durchmesser 35 cm, mit 360°-Hebel zur einfachen Höhenverstellung
Polsterung:	Klassisch (PVC), 8 Farben Premium (PU), 6 Farben
Höhe:	Gymna Stool 54-73 cm Gymna Saddle Stool 56-75 cm
Maximale Belastung:	150 kg
Gestell:	Aluminium mit weißer Pulver- beschichtung
Räder:	Selbsthemmende Rollen, weiche Lauffläche für härtere Oberflächen

Gymna Stool

Der runde und flache Sitz mit einem Durchmesser von 35 cm verleiht dem Hocker einen universellen Charakter. Der Gymna Stool ist auch für den Gebrauch durch Patienten geeignet. Dank des 360°-Hebels, der jederzeit von allen Seiten zugänglich ist, lässt sich der Hocker einfach in der Höhe verstellen.



Polsterung

Die Sitze sind elegant und mit hochwertigen Details aus langlebigem, phthalatfreiem und biokompatiblen Kunstleder ausgestattet: Klassisch oder Premium. Gymna Stools sind in den gleichen Farben wie die gymna. PRO-Serie erhältlich.

Gymna Saddle Stool


Dies ist der ideale ergonomische Sitz für den täglichen Gebrauch durch das medizinische Personal. Aufgrund der Sattelform sitzt der Benutzer in einem offeneren Hüftwinkel, sodass das Becken nach vorne kippt und die Wirbelsäule die natürliche S-Form annimmt. Die Beckenneigung kann auch separat eingestellt werden.



- Aktive und verbesserte Sitzposition, die die Rückenbelastung verringert.
- Verbesserte Mobilität im Sitzen.

Farben

Premium

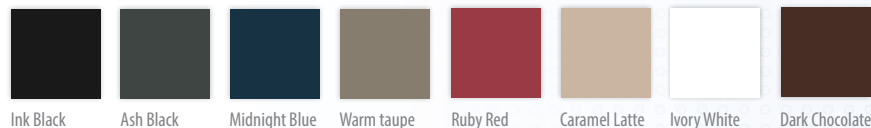

Classique



Höhenverstellung

Die Hocker sind mittels einer sicheren Gasfeder in der Höhe verstellbar. Die Hocker eignen sich am besten für Personen mit einer Körpergröße zwischen 160 und 185 cm. Die maximale Belastung beträgt 150 kg.



Gestell mit fünf Beinen

Das fünfbeinige Aluminiumgestell ist mit einer kratzfesten weißen Pulverbeschichtung versehen und hat einen Durchmesser von 50 cm. Damit bietet es ausreichend Stabilität, ist jedoch klein genug, um problemlos in der Nähe der Behandlungsliege eingesetzt werden zu können.



Räder

Die fünf selbsthemmenden Laufrollen tragen zur Sicherheit in der Praxis bei. Beim Hinsetzen rutscht der Stuhl nicht plötzlich weg. Sobald Sie Platz nehmen, rollt der Hocker leichtgängig. Die Räder haben eine weiche Lauffläche, wodurch sie besonders für harte Oberflächen geeignet sind, wie sie in den meisten Praxen verwendet werden.



Kryotherapie



Tecar - Diathermie



Stoßwellentherapie



Physio Care



Behandlungsliegen




Elektrolyse



Elektrotherapie



Ihr Händler



gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510