

gymna.ONE

The art of therapy

DATASHEET



gymna[®]

gymna.ONE – unique dans son style

gymna.ONE n'est pas seulement une table de massage—c'est le reflet d'un style unique et d'aspirations professionnelles.

gymna.ONE offre une durabilité inégalée, un design ergonomique et une technologie avancée, garantissant un confort et une efficacité supérieurs pour les professionnels de la santé.



Le réglage de la hauteur rapide et sécurisé

Lever la table de la position la plus basse à la plus haute est nettement plus rapide par rapport aux modèles précédents, ce qui permet d'économiser du temps précieux pour le thérapeute comme pour le patient. Le système de réglage de la hauteur Gymna i-Control, le plus sûr, est positionné de manière à être facilement accessible de n'importe où autour de la table gymna.ONE sans risque de mouvement involontaire.



Le design ergonomique garantit un confort optimal pour le patient

Conçu pour assurer un confort et une ergonomie optimaux pour le patient, la gymna.ONE est dotée de fonctionnalités exclusives de la marque Gymna telles que notre système de soutien des bras One-Click, le support facial Ergomax et le chauffage des coussins.




Descendre les deux accoudoirs en même temps avec le système de soutien des bras One-Click. Les accoudoirs sont légèrement inclinés pour une détente plus naturelle des cervicales et des épaules. Le support facial doux et sans couture Ergomax est fabriqué en matériau étanche et lavable pour une hygiène optimale. L'association de ces deux éléments à notre système de chauffage des coussins pour créer un environnement confortable pour votre patient.



Design exquis combiné à une qualité de fabrication supérieure

Les bras en aluminium de forme organique, la base en bois à plusieurs couches et le bord protecteur fonctionnel mais élégant font de gymna.ONE une véritable œuvre d'art. Combiner artisanat et design aboutit à plus qu'une simple table de traitement fonctionnelle. Cela transforme tout espace en un sanctuaire accueillant de confort et de style.

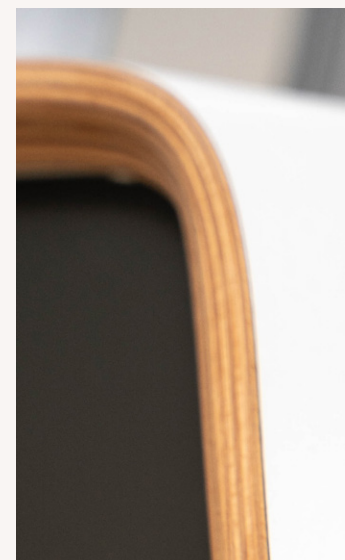


CARACTÉRISTIQUES

Dimensions:	206 x 67 cm
Poids:	112 - 127 kg
Règlage de la hauteur:	50 – 100 cm
Capacité de levage max.:	200 kg
Force du moteur:	10.000 N
Temps de levage:	18 sec.
Tension secteur:	100-240VAC, 50-60 Hz
Consommation max.:	3,0 A
Classe d'isolation:	II 
Classification de l'appareil:	I 
Pièces appliquées:	Type BF
Résistance à l'humidité:	IP21
Conformité:	Directive CE 2017/745, 2012/19, 2011/65 IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2
Garantie:	Table 5 ans, Rembourrage haut de gamme 3 années

**FONCTIONNALITÉ****Série gymna.ONE**

	D6	T7	Q8
Tableau en 2 sections	●		
Tableau en 3 sections		●	
Tableau en 4 sections			●
Section de tête	●	●	●
Support visage Ergomax	●	●	●
Supports de bras One-Click	●	●	●
Supports latéraux rabattables	●	●	●
Coussin chauffant	●	●	●
Revêtement en PU Premium	●	●	●
Flexion lombaire,		●	
électrique Partie arrière		●	
Partie arrière, électrique		○	●
Coin salon, électrique			●
Partie inférieure des jambes			●
Règlage électrique de la hauteur	●	●	●
Commutateur i-Control	●	●	●
Interrupteur de sécurité	●	●	●
Système de roues	●	●	●
4 combinaisons de couleurs	●	●	●
Pack LED	○	○	○

● = standard ○ = optional

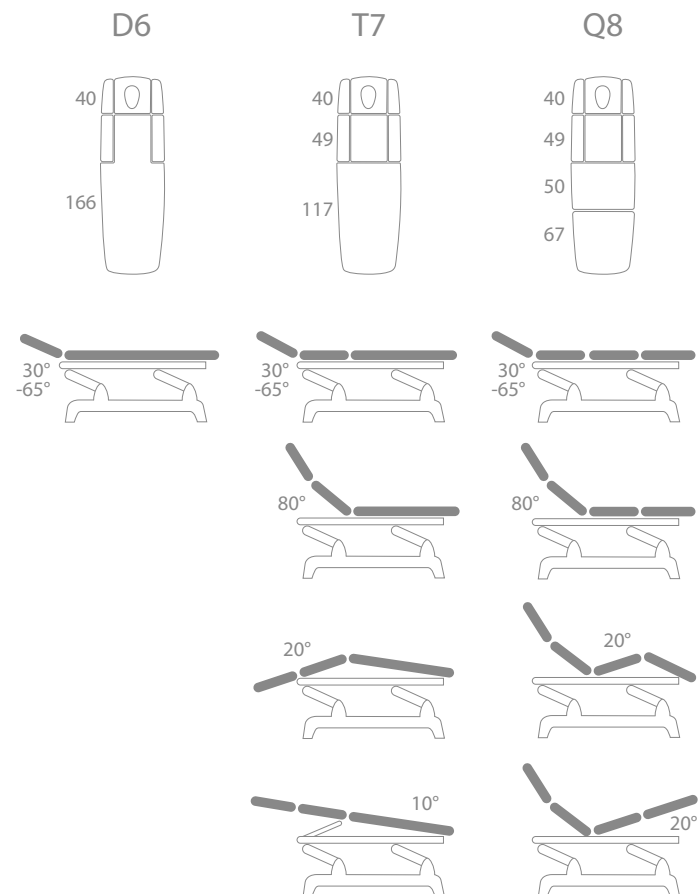POSITIONS**COUSSINS**

Revêtement:	Cuir PU vegan, sans phtalates, biocompatible, résistant à l'abrasion et ignifuge.
Mousse:	PE, double rembourrage. Couche inférieure 100 kg/m ³ Couche supérieure 40 kg/m ³
Chauffage du coussin:	34°C, 36°C et 38°C Fonctionnement sans fil Bluetooth Minuterie automatique 30 min. Max. consommation = 180 Ergo-
Max.:	Mousse PU, peau fermée, faible densité (5° Shore)

COULEURS DES COUSSINS

Midnight Blue	Ink Black	Ash Black
Ruby Red	Ivory White	Caramel Latte
Warm taupe	Dark Chocolate	Cognac Brown

gymna.com **gymna**[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 532