

*La qualità nella
sua forma più pura*



gymna.GO

gymna[®]

Gymna

lettini da trattamento

Oltre mezzo secolo di qualità

Fin dalla sua creazione oltre mezzo secolo fa, Gymna sviluppa lettini da trattamento seguendo le esigenze dei fisioterapisti. La nostra esperienza, coniugata a quella di terapisti e pazienti di tutto il mondo, rende i lettini perfettamente adatti alla fisioterapia. I lettini da trattamento Gymna sono la scelta privilegiata dei terapisti di tutto il mondo e disponibili in oltre 100 paesi.

Con **gymna.GO**, la linea di livello base, ampliamo il nostro portafoglio di prodotti per fornire l'accesso alla qualità Gymna a un maggior numero di operatori.

*Basically
perfect*



Design performante




Le forme

Alla base di un buon design

Alla base di un buon design sono profili e forme, circolari, triangolari o rettangolari, semplici forme elementari. Il loro uso effettivo ha prodotto le proporzioni definite e bilanciate del lettino da trattamenti **gymna.GO**. Insieme alla qualità del marchio Gymna, tutti gli elementi basilari sono inseriti in una soluzione essenziale adatta alla pratica quotidiana.

gymna.GO
Basically Perfect

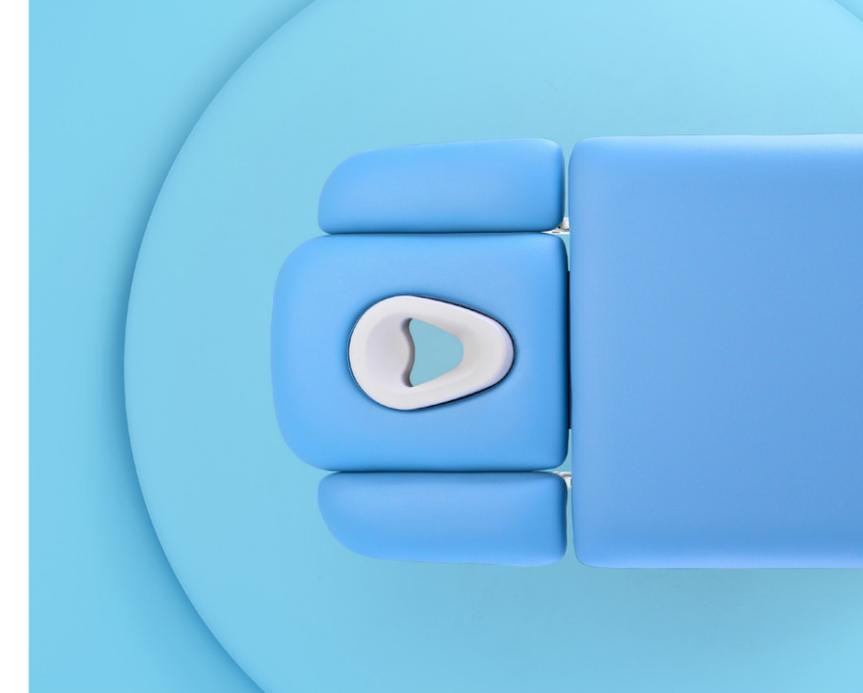



*“Ideale
per me”*

La funzionalità è essenziale

La qualità prima di tutto

L'acquisto di un lettino da trattamenti è il risultato di un processo decisionale ponderato sia per i principianti sia per gli esperti. Il segreto è il giusto equilibrio tra funzionalità e qualità. **gymna.GO** offre semplicemente un supporto solido e sicuro per i pazienti in posizione seduta o sdraiata. La regolazione dell'altezza è affidabile e consente loro di assumere una determinata posizione e al terapeuta di lavorare all'altezza idonea per non incorrere in malattie professionali. Per questo **gymna.GO** ha tutto ciò che si chiede a un lettino da trattamento di livello base.

La qualità nella sua forma più pura



Comprendere
le esigenze



Supportare *il trattamento*

Utilizzando le giuste caratteristiche del prodotto

gymna.GO ha l'altezza regolabile ed è disponibile in 7 modelli diversi con innumerevoli optional e accessori per creare il lettino ideale. Troverai certamente un lettino adatto alle tue esigenze, sia che tu preferisca la regolazione dell'altezza elettrica o idraulica, 2 o 3 sezioni, braccioli e schienali regolabili o persino un lettino per trazioni. Approfitta dello straordinario Gymna Ergomax, il supporto viso di forma ergonomica ultra-igienico che garantisce al paziente una posizione naturale.

Sebbene sia stato sviluppato per i fisioterapisti, **gymna.GO** è utilizzabile anche come lettino per visite mediche, grazie ad accessori come supporti ginecologici per le gambe, porta rotoli di carta e rotelle.



Funzioni

La qualità nella sua forma più pura

La regolazione dell'altezza è essenziale per posizionare il paziente e agevolare il carico di lavoro del terapeuta nel corso della pratica quotidiana. Per questo **gymna.GO** è dotato della funzione standard di regolazione dell'altezza, impostabile attraverso un potente motore elettrico o tramite una pompa idraulica a pedale.

Pompa idraulica

Grazie alla pompa idraulica, **gymna.GO** non richiede elettricità ed è regolabile in qualsiasi momento e luogo.



Qualità comprovata

I lettini da trattamento **gymna.GO** sono prodotti in Belgio presso un rinomato stabilimento, una "Fabbrica del futuro" che garantisce qualità costante e durata. Le strutture in acciaio sono saldate a macchina e rifinite con un gradevole rivestimento in polvere semi-lucida per garantire una protezione super-resistente e duratura. I cuscinetti non richiedono manutenzione e garantiscono movimento silenzioso e relax.



i-Control

Sistema intelligente per la regolazione precisa e sicura dell'altezza da qualsiasi posizione attorno al lettino. Particolarmente utile nella pratica fisioterapica. Due modalità operative, per regolazione continua e a impulso. In alternativa, si può selezionare un interruttore a pedale singolo.



Sezioni di testa e schiena regolabili

Le sezioni di testa e schiena sono interamente supportate da molle a gas di alta qualità, per garantire il posizionamento facile, sicuro e confortevole dei pazienti.

Braccioli

I braccioli abbassati aumentano il comfort del paziente quando si trova a faccia in giù in posizione prona, in quanto consentono di rilassare i muscoli del collo e delle spalle.



Il tocco di finitura

È possibile completare il lettino con optional e accessori come lo speciale supporto viso Ergomax, rotelle, interruttore di sicurezza, porta rotoli di carta o supporti ginecologici per le gambe Gymna. E, soprattutto, scegliere il colore adatto allo studio.




Interruttore di sicurezza

gymna.GO può essere dotato di interruttore di sicurezza integrato per disattivare il motore durante l'assenza dell'operatore e prevenire l'uso non autorizzato del lettino. La funzione è standard con i-Control.

Rotelle

gymna.GO è disponibile con una serie di quattro rotelle girevoli, per consentire l'uso del lettino in diversi luoghi e facilitare la pulizia dello studio.

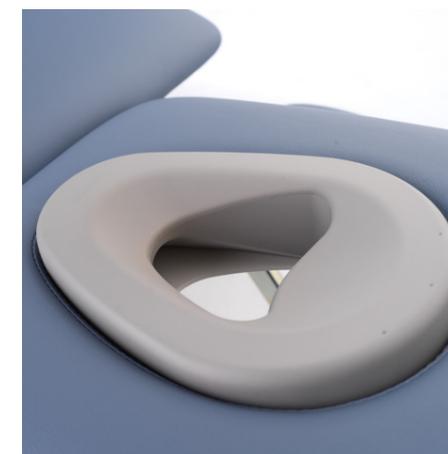

Supporto viso Ergomax

Lo speciale supporto viso Ergomax Gymna è impermeabile e lavabile per garantire la massima igiene e proteggere il paziente dai germi. Grazie alla forma ergonomica, alla morbidezza e all'assenza di cuciture, Ergomax è la soluzione ideale per i trattamenti in posizione prona. È inoltre disponibile anche la tradizionale apertura per il viso nel cuscino.


Cuscini

I cuscini **gymna.GO** sono rivestiti di pelle sintetica biocompatibile e priva di ftalato. Oltre all'effetto morbido e naturale, sono facili da pulire o disinfettare e ignifughi. All'interno i cuscini hanno un unico strato di schiuma PE resistente con risposta lineare alla pressione, per offrire il massimo comfort nel supporto al paziente.



Colori

La linea di rivestimenti Classique offre 15 colori* a scelta, da classici ed evergreen, a brillanti e vivaci, per **gymna.GO**.

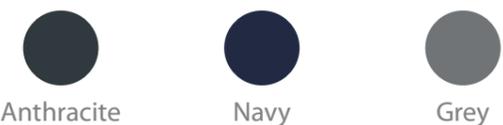

* Colori solo a scopo illustrativo



Specificazioni

Dimensioni	206 x 67 cm
Peso	± 75 - 80 kg (a seconda del modello)
Regolazione dell'altezza	50 - 100 cm elettrica 52 - 99 cm idraulica
Capacità di sollevamento	max. 200 kg
Tensione di rete	230 VAC, 50/60 Hz 120 VAC, 60 Hz 100 VAC, 50/60 Hz
Consumo energetico	Max. 2,0 A (a seconda del modello)
Classe di isolamento	II
Classificazione del dispositivo	I
Parti applicate	Tipo BF
Resistente all'umidità	IP21
Utilizzo del motore	max. 2 minuti acceso / 18 minuti spento
Conformità	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 Direttiva UE 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU



Supporto viso Ergomax

Ottimizza comfort e igiene

Forma ergonomica per una posizione naturale del paziente e concezione con apertura a forma di cuore che lascia liberi occhi e bocca. Il supporto viso Ergomax è morbido e senza cuciture; l'ampia superficie contribuisce a distribuire la pressione sul viso, che viene assorbita dalla fronte e dal mento. La cavità presente su ambo i lati può essere selezionata, grande o piccola, in funzione alla forma del viso del paziente. L'igiene è la priorità assoluta in ogni studio. Il supporto viso Ergomax è facilmente estraibile dal lettino. La schiuma a bassa densità è impermeabile, lavabile e resistente ai disinfettanti di uso comune negli studi e consente a ogni paziente di sdraiarsi su un lettino fresco e igienizzato.



Configurazione



configurazione gymna.GO	D1	D1e	D2	D4	T3x	T5x	Trazione
Regolazione dell'altezza							
Elettrica con i-Control	●	●	●	●	●	●	●
Elettrica con interruttore a pedale	●	●	●	●	●	●	●
Idraulica con pistone a pedale	●	●	●	●	●	●	●
Configurazione standard							
Finitura lineare del cuscino	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento classico, 15 colori	●	●	●	●	●	●	●
Larghezza 67 cm	●	●	●	●	●	●	●
Sezione testa regolabile (in alto e in basso)			●	●	●	●	
Braccioli regolabili				●		●	
Sezione schiena regolabile (in alto)	●				●	●	●
Sezione schiena regolabile (in alto e in basso)		●					
Cuscino scorrevole per trazione							●
Optional e accessori							
Interruttore di sicurezza per controllo manuale o a pedale	○	○	○	○	○	○	○
Apertura viso	○	○	○	●	○	●	○
Apertura viso Ergomax	○	○	○	○	○	○	○
Rotelle	○	○	○	○	○	○	○
Supporti ginecologici gambe	○	○	○	○	○	○	
Controllo manuale*	○	○	○	○	○	○	○
Porta rotoli di carta 50 cm / 60 cm	○	○	○	○	○	○	○
Trazione							○

● Funzione standard

○ Funzione optional

* In combinazione con i-Control o in sostituzione dell'interruttore a pedale



Basically perfect

gymna.GO

La qualità nella sua forma più pura



Cryotherapy



Tecar - Diathermy



Shockwave Therapy



Physio Care



Electrolysis




Electrotherapy



Active Motion



Your dealer



gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510