

*Kwaliteit in haar
puurste vorm*



gymna.GO

gymna[®]

Gymna *behandeltafels*

Meer dan een halve eeuw kwaliteit

Sinds de oprichting meer dan een halve eeuw geleden ontwikkelt Gymna behandeltafels met de behoeften van fysiotherapeuten voor ogen. We combineren onze ervaring met die van therapeuten en patiënten overal ter wereld om onze behandeltafels perfect af te stemmen op de fysiotherapiepraktijk. De behandeltafels van Gymna genieten de voorkeur van therapeuten over de hele wereld en zijn in meer dan 100 landen te vinden.

Met de **gymna.GO**, ons instapmodel, breiden we onze productportfolio uit en brengen we de kwaliteit van Gymna binnen het bereik van een bredere groep therapeuten.

Basically
perfect



*Ontwikkeld
om te presteren*




Vorm en vormgeving

De grondslag voor een goed ontwerp

Aan de basis van elk goed ontwerp liggen vormen en figuren, cirkels, driehoeken of rechthoeken, pure geometrische lichamen. Het doeltreffende gebruik van deze vormen en figuren geeft de **gymna.GO**-behandeltafel haar evenwichtige proporties. Voeg daar nog de kenmerkende Gymna kwaliteit aan toe en u hebt een oplossing voor uw dagelijkse praktijk zonder franjes, maar met alle essentiële elementen.

gymna.GO

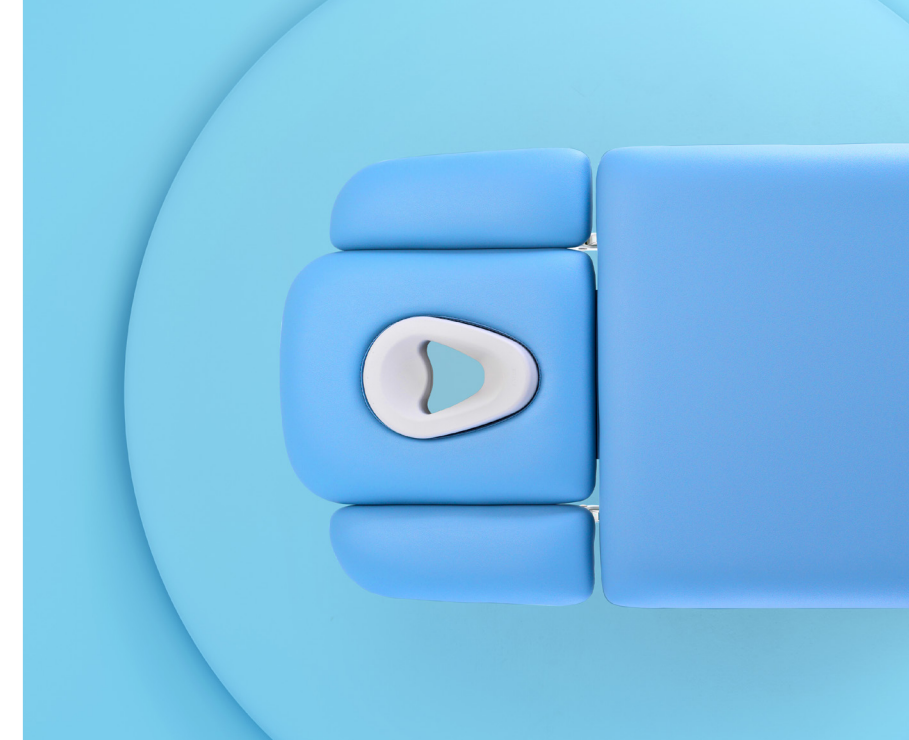



*“Perfect
voor mijn
praktijk”*

Functionaliteit staat centraal

Kwaliteit voorop

Of u nu net begonnen bent of jarenlange expertise hebt, de aankoop van een behandeltafel is het resultaat van een doordacht besluitvormingsproces. U zoekt immers naar het juiste evenwicht tussen functionaliteit en kwaliteit. De **gymna.GO** biedt uw patiënten heel eenvoudig solide en veilige ondersteuning, in zit- en lighouding. De betrouwbare hoogteverstelling helpt hen om de juiste houding aan te nemen en u om op de juiste hoogte te werken, zodat u geen letsel oploopt op het werk. Zo biedt de **gymna.GO** alles wat u nodig hebt in uw instapbehandeltafel.

Kwaliteit in haar puurste vorm



Uw behoeften begrijpen



Ter ondersteuning van de behandeling

Dankzij de juiste productkenmerken

De **gymna.GO** is in de hoogte verstelbaar en verkrijgbaar in 7 verschillende modellen, met verschillende opties en accessoires om ze volledig af te stemmen op uw behoeften. Of uw voorkeur nu uitgaat naar elektrische of hydraulische hoogteverstelling, 2 of 3 delen, verstelbare armsteunen, een verstelbare rugleuning of zelfs een tractietafel, u vindt gegarandeerd een model dat aan uw vereisten voldoet. Profiteer ook van Gymna's slimme Ergomax-optie, het ultrahygiënische, ergonomisch gevormde gezichtskussen voor een natuurlijke houding van de patiënt.

De **gymna.GO** mag dan wel ontwikkeld zijn met fysiotherapeuten voor ogen, toch kan ze ook als onderzoekstafel worden gebruikt, met accessoires zoals gynaecologische beensteunen, papierrolhouders en wielen.



Kenmerken

Kwaliteit in haar puurste vorm

Hoogteverstelling is essentieel om de tafel af te stemmen op uw patiënten en om de werkdruk in uw dagelijkse praktijk te verlagen. Daarom is de **gymna.GO** standaard in de hoogte te verstellen. Dat kan met de krachtige elektromotor of met een hydraulische voetpomp.

Hydraulische pomp

Met de hydraulische pomp heeft de **gymna.GO** helemaal geen elektriciteit nodig en kan ze om het even waar en wanneer worden gebruikt.



Bewezen kwaliteit

De behandelafels van **gymna.GO** worden in België gemaakt, in een bekroonde fabriek. Deze ‘fabriek van de toekomst’ garandeert constante kwaliteit en duurzaamheid. De stalen frames zijn robotgelast en worden afgewerkt met een halfmatte poedercoating die een sterke, duurzame bescherming biedt. Onderhoudsvrije lagers garanderen geruisloze bewegingen en gebruiksgemak.



i-Control

Intelligent voetbedieningssysteem om de hoogte van de tafel gemakkelijk, nauwkeurig en veilig in te stellen van om het even waar errond. Vooral handig in de fysiopraktijk. Twee werkingsmodi voor een continue of gepulste hoogteverstelling. Er kan ook gekozen worden voor een enkele voetschakelaar.



Verstelbaar hoofd- en rugdeel

Zowel hoofd- als rugdeel worden ondersteund door hoogwaardige gasdrukveren zodat de houding van uw patiënt eenvoudig, veilig en comfortabel aan te passen is.

Armsteunen

Wanneer ze naar beneden worden gebracht, bieden de steunen de patiënt meer comfort en ontlasten ze de nek- en schouderspieren in buikligging.



De finishing touch

Werk uw tafel af met opties en accessoires zoals Gymna's kenmerkende Ergomax gezichtskussens, wielen, veiligheidsschakelaar, een papierrolhouder of gynaecologische beensteunen. En als kers op de taart kiest u ook de kleur die past bij uw praktijk.



Veiligheidsschakelaar

De **gymna.GO** kan worden voorzien van een geïntegreerde veiligheidsschakelaar die de motor uitschakelt wanneer u afwezig bent. Zo voorkomt u onbevoegd gebruik van de tafel. Deze functie komt standaard bij i-Control.

Wielen

De **gymna.GO** kan worden geleverd met een set van vier zwenkwielen. Die maken het gemakkelijker om de tafel te verplaatsen tijdens bijvoorbeeld de reiniging van uw praktijk.




Kussens

De kussens op de **gymna.GO** zijn bekleed met biocompatibel en ftalaatvrij kunstleer. Dit voelt zacht en natuurlijk aan, laat zich eenvoudig reinigen of desinfecteren en is brandvertragend. De kussens zijn gevoerd met één laag duurzaam PE-schuim dat lineair reageert op druk, zodat ze de patiënt zo comfortabel mogelijk ondersteunen.



Ergomax gezichtskussens

Het unieke Gymna Ergomax gezichtskussen is waterbestendig en wasbaar voor maximale hygiëne. Zo beschermt het uw patiënten tegen bacteriën. Dankzij de ergonomische vorm en zachte, naadloze eigenschappen is de Ergomax de ideale oplossing voor behandeling in buikligging. Het hoofdkussen kan ook worden voorzien van een klassieke gezichtsopening.

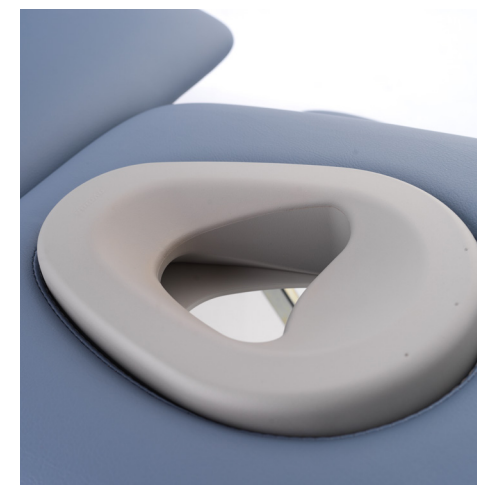

Kleuren

De **gymna.GO** is verkrijgbaar in 15 kleuren*, van klassiek en tijdloos tot levendig en vrolijk. Kies uw lievelingskleur uit onze bekledingslijn Classique.

		
Anthracite	Navy	Grey
		
Coffee	Cashmere	Sahara
		
Titanium	Blue	Sky
		
Cherry	Violet	Apricot
		
Green	Pistachio	Pink

* Kleuren alleen ter illustratie



Specificaties

Afmetingen	206 x 67 cm
Gewicht	± 75 - 80 kg (afhankelijk van het model)
Hoogteverstelling	50 – 100 cm elektrisch 52 – 99 cm hydraulisch
Hefvermogen	max. 200 kg
Netspanning	230 VAC, 50/60 Hz 120 VAC, 60 Hz 100 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	Max. 2,0 A (afhankelijk van het model)
Isolatieklasse	II
Apparaatclassificatie	I
Aangebrachte onderdelen	Type BF
Vochtbestendigheid	IP21
Motorgebruik	max. 2 minuten aan/ 18 minuten uit
Conformiteit	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EC richtlijn 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU



Ergomax gezichtskussen

Maximaliseer comfort en hygiëne

Ergonomisch gevormd voor een natuurlijke houding van de patiënt en ontworpen met een hartvormige opening die ogen en mond vrijlaat. Het Ergomax gezichtskussen is zacht, naadloos en heeft een groot oppervlak waardoor de druk op het gezicht oppervlak , waardoor de druk op het gezicht gespreid wordt en door het voorhoofd en de kin geabsorbeerd wordt. gespreid en door het voorhoofd en de kin geabsorbeerd wordt. Het Ergomax gezichtskussen heeft een uitsparing aan beide zijden. Deze is flexibel, zodat u kunt kiezen voor een grote of kleine uitsparing, afhankelijk van de vorm van het gezicht van de patiënt.

Hygiëne is in elke praktijk een topprioriteit. Het Ergomax gezichtskussen is eenvoudig uit de tafel te verwijderen. Het schuim met lage dichtheid is waterbestendig, wasbaar en bestand tegen de ontsmettingsmiddelen die vaak worden gebruikt in een praktijk. Zo kan elke patiënt liggen op een tafel die fris en hygiënisch aanvoelt.



Configuratie



Configuratie van de gymna.GO	D1	D1e	D2	D4	T3x	T5x	Tractie
Hoogteverstelling							
Elektrisch met i-Control	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisch met voetschakelaar	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulisch met voetpomp	●	●	●	●	●	●	●
Standaardconfiguratie							
Lineaire kussenafwerking	●	●	●	●	●	●	●
Bekleding Classique, 15 kleuren	●	●	●	●	●	●	●
Breedte 67 cm	●	●	●	●	●	●	●
Verstelbaar hoofddeel (omhoog en omlaag)			●	●	●	●	
Verstelbare armsteunen				●		●	
Verstelbaar rugdeel (omhoog)	●				●	●	●
Verstelbaar rugdeel (omhoog en omlaag)		●					
Schuifkussen voor tractie							●
Opties en accessoires							
Veiligheidsschakelaar voor voet- of handbediening	○	○	○	○	○	○	○
Standaard gezichtsopening	○	○	○	●	○	●	○
Ergomax gezichtsopening	○	○	○	○	○	○	○
Wielen	○	○	○	○	○	○	○
Gynaecologische beensteunen	○	○	○	○	○	○	
Handbediening*	○	○	○	○	○	○	○
Papierrolhouder 50 cm / 60 cm	○	○	○	○	○	○	○
Tractie							○

● Standaardkenmerk ○ Optie * In combinatie met i-Control, of ter vervanging van voetschakelaar




Basically
perfect



gymna.GO

Kwaliteit in haar puurste vorm

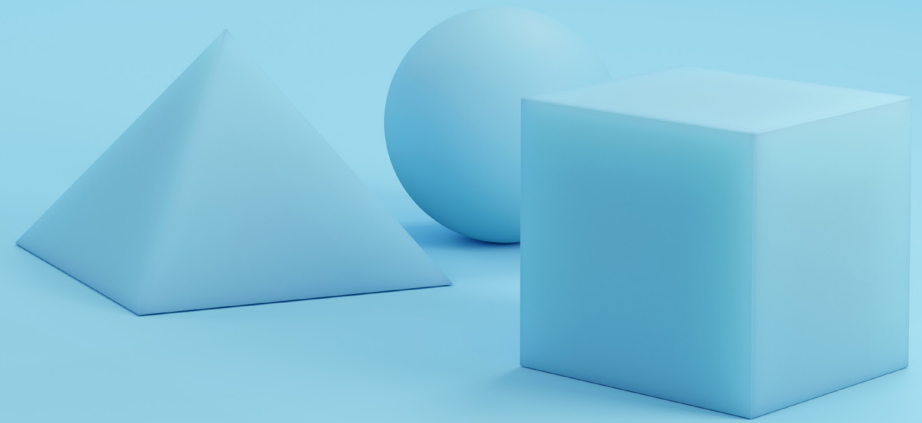

Cryotherapy



Tecar - Diathermy



Shockwave Therapy



Physio Care



Electrolysis




Electrotherapy



Active Motion



Uw verdeler:



gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, België

Tel: +32 (0)89 510 510