

*La qualità nella  
sua forma più pura*



*gymna*.GO

***gymna***<sup>®</sup>

# **Gymna**

## *lettini da trattamento*

### **Oltre mezzo secolo di qualità**

Fin dalla sua creazione oltre mezzo secolo fa, Gymna sviluppa lettini da trattamento seguendo le esigenze dei fisioterapisti. La nostra esperienza, coniugata a quella di terapisti e pazienti di tutto il mondo, rende i lettini perfettamente adatti alla fisioterapia. I lettini da trattamento Gymna sono la scelta privilegiata dei terapisti di tutto il mondo e disponibili in oltre 100 paesi.

Con **gymna.GO**, la linea di livello base, ampliamo il nostro portafoglio di prodotti per fornire l'accesso alla qualità Gymna a un maggior numero di operatori.

*Basically  
perfect*



**Design**  
*performante*



# Le forme

## Alla base di un buon design

Alla base di un buon design sono profili e forme, circolari, triangolari o rettangolari, semplici forme elementari. Il loro uso effettivo ha prodotto le proporzioni definite e bilanciate del lettino da trattamenti **gymna.GO**. Insieme alla qualità del marchio Gymna, tutti gli elementi basilari sono inseriti in una soluzione essenziale adatta alla pratica quotidiana.

**gymna.GO**  
Basically Perfect





*“Ideale  
per me”*

## *La funzionalità è essenziale*

### **La qualità prima di tutto**

L'acquisto di un lettino da trattamenti è il risultato di un processo decisionale ponderato sia per i principianti sia per gli esperti. Il segreto è il giusto equilibrio tra funzionalità e qualità. **gymna.GO** offre semplicemente un supporto solido e sicuro per i pazienti in posizione seduta o sdraiata. La regolazione dell'altezza è affidabile e consente loro di assumere una determinata posizione e al terapeuta di lavorare all'altezza idonea per non incorrere in malattie professionali. Per questo **gymna.GO** ha tutto ciò che si chiede a un lettino da trattamento di livello base.

***La qualità  
nella sua forma  
più pura***



# **Comprendere** *le esigenze*





# Supportare il trattamento

## Utilizzando le giuste caratteristiche del prodotto

**gymna.GO** ha l'altezza regolabile ed è disponibile in 7 modelli diversi con innumerevoli optional e accessori per creare il lettino ideale. Troverai certamente un lettino adatto alle tue esigenze, sia che tu preferisca la regolazione dell'altezza elettrica o idraulica, 2 o 3 sezioni, braccioli e schienali regolabili o persino un lettino per trazioni. Approfitta dello straordinario Gymna Ergomax, il supporto viso di forma ergonomica ultra-igienico che garantisce al paziente una posizione naturale.

Sebbene sia stato sviluppato per i fisioterapisti, **gymna.GO** è utilizzabile anche come lettino per visite mediche, grazie ad accessori come supporti ginecologici per le gambe, porta rotoli di carta e rotelle.



# Funzioni

## Pompa idraulica

Grazie alla pompa idraulica, **gymna.GO** non richiede elettricità ed è regolabile in qualsiasi momento e luogo.



## Qualità comprovata

I lettini da trattamento **gymna.GO** sono prodotti in Belgio presso un rinomato stabilimento, una "Fabbrica del futuro" che garantisce qualità costante e durata. Le strutture in acciaio sono saldate a macchina e rifinite con un gradevole rivestimento in polvere semi-lucida per garantire una protezione super-resistente e duratura. I cuscinetti non richiedono manutenzione e garantiscono movimento silenzioso e relax.

## La qualità nella sua forma più pura

La regolazione dell'altezza è essenziale per posizionare il paziente e agevolare il carico di lavoro del terapeuta nel corso della pratica quotidiana. Per questo **gymna.GO** è dotato della funzione standard di regolazione dell'altezza, impostabile attraverso un potente motore elettrico o tramite una pompa idraulica a pedale.



## i-Control

Sistema intelligente per la regolazione precisa e sicura dell'altezza da qualsiasi posizione attorno al lettino. Particolarmente utile nella pratica fisioterapica. Due modalità operative, per regolazione continua e a impulso. In alternativa, si può selezionare un interruttore a pedale singolo.



## Sezioni di testa e schiena regolabili

Le sezioni di testa e schiena sono interamente supportate da molle a gas di alta qualità, per garantire il posizionamento facile, sicuro e confortevole dei pazienti.

## Braccioli

I braccioli abbassati aumentano il comfort del paziente quando si trova a faccia in giù in posizione prona, in quanto consentono di rilassare i muscoli del collo e delle spalle.



## Il tocco di finitura

È possibile completare il lettino con optional e accessori come lo speciale supporto viso Ergomax, rotelle, interruttore di sicurezza, porta rotoli di carta o supporti ginecologici per le gambe Gymna. E, soprattutto, scegliere il colore adatto allo studio.



### Interruttore di sicurezza

**gymna.GO** può essere dotato di interruttore di sicurezza integrato per disattivare il motore durante l'assenza dell'operatore e prevenire l'uso non autorizzato del lettino. La funzione è standard con i-Control.


### Rotelle

**gymna.GO** è disponibile con una serie di quattro rotelle girevoli, per consentire l'uso del lettino in diversi luoghi e facilitare la pulizia dello studio.



### Supporto viso Ergomax

Lo speciale supporto viso Ergomax Gymna è impermeabile e lavabile per garantire la massima igiene e proteggere il paziente dai germi. Grazie alla forma ergonomica, alla morbidezza e all'assenza di cuciture, Ergomax è la soluzione ideale per i trattamenti in posizione prona. È inoltre disponibile anche la tradizionale apertura per il viso nel cuscino.

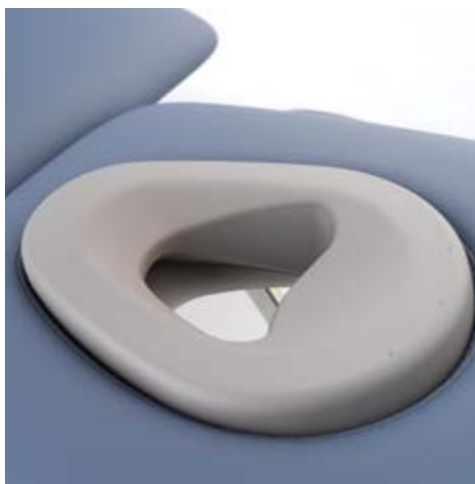

### Cuscini

I cuscini **gymna.GO** sono rivestiti di pelle sintetica biocompatibile e priva di ftalato. Oltre all'effetto morbido e naturale, sono facili da pulire o disinfettare e ignifughi. All'interno i cuscini hanno un unico strato di schiuma PE resistente con risposta lineare alla pressione, per offrire il massimo comfort nel supporto al paziente.



# Colori

La linea di rivestimenti Classique offre 15 colori\* a scelta, da classici ed evergreen, a brillanti e vivaci, per **gymna.GO**.

		
Anthracite	Navy	Grey
		
Coffee	Cashmere	Sahara
		
Titanium	Blue	Sky
		
Cherry	Violet	Apricot
		
Green	Pistachio	Pink

\* Colori solo a scopo illustrativo



# Specificazioni

Dimensioni	206 x 67 cm
Peso	± 75 - 80 kg (a seconda del modello)
Regolazione dell'altezza	50 - 100 cm elettrica 52 - 99 cm idraulica
Capacità di sollevamento	max. 200 kg
Tensione di rete	230 VAC, 50/60 Hz 120 VAC, 60 Hz 100 VAC, 50/60 Hz
Consumo energetico	Max. 2,0 A (a seconda del modello)
Classe di isolamento	II
Classificazione del dispositivo	I
Parti applicate	Tipo BF
Resistente all'umidità	IP21
Utilizzo del motore	max. 2 minuti acceso / 18 minuti spento
Conformità	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EC directives 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU



# Supporto viso Ergomax

## Ottimizza comfort e igiene

Forma ergonomica per una posizione naturale del paziente e concezione con apertura a forma di cuore che lascia liberi occhi e bocca. Il supporto viso Ergomax è morbido e senza cuciture; l'ampia superficie contribuisce a distribuire la pressione sul viso, che viene assorbita dalla fronte e dal mento. La cavità presente su ambo i lati può essere selezionata, grande o piccola, in funzione alla forma del viso del paziente. L'igiene è la priorità assoluta in ogni studio. Il supporto viso Ergomax è facilmente estraibile dal lettino. La schiuma a bassa densità è impermeabile, lavabile e resistente ai disinfettanti di uso comune negli studi e consente a ogni paziente di sdraiarsi su un lettino fresco e igienizzato.



# Configurazione



configurazione gymna.GO	D1	D1e	D2	D4	T3x	T5x	Trazione
<b>Regolazione dell'altezza</b>							
Elettrica con i-Control	●	●	●	●	●	●	●
Elettrica con interruttore a pedale	●	●	●	●	●	●	●
Idraulica con pistone a pedale	●	●	●	●	●	●	●
<b>Configurazione standard</b>							
Finitura lineare del cuscino	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento classico, 15 colori	●	●	●	●	●	●	●
Larghezza 67 cm	●	●	●	●	●	●	●
Sezione testa regolabile (in alto e in basso)			●	●	●	●	
Braccioli regolabili				●		●	
Sezione schiena regolabile (in alto)	●				●	●	●
Sezione schiena regolabile (in alto e in basso)		●					
Cuscino scorrevole per trazione							●
<b>Optional e accessori</b>							
Interruttore di sicurezza per controllo manuale o a pedale	○	○	○	○	○	○	○
Apertura viso	○	○	○	●	○	●	○
Apertura viso Ergomax	○	○	○	○	○	○	○
Rotelle	○	○	○	○	○	○	○
Supporti ginecologici gambe	○	○	○	○	○	○	
Controllo manuale*	○	○	○	○	○	○	○
Porta rotoli di carta 50 cm / 60 cm	○	○	○	○	○	○	○
Trazione							○

● Funzione standard

○ Funzione optional

\* In combinazione con i-Control o in sostituzione dell'interruttore a pedale

*Basically  
perfect*



# *gymna.GO*

*La qualità nella sua forma più pura*



Cryotherapy



Tecar - Diathermy



Shockwave Therapy



Physio Care



Electrolysis




Electrotherapy



Active Motion



Your dealer



[gymna.com](http://gymna.com)

***gymna***<sup>®</sup>

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510